


## NeoBar®

### ABRAÇADEIRA ET

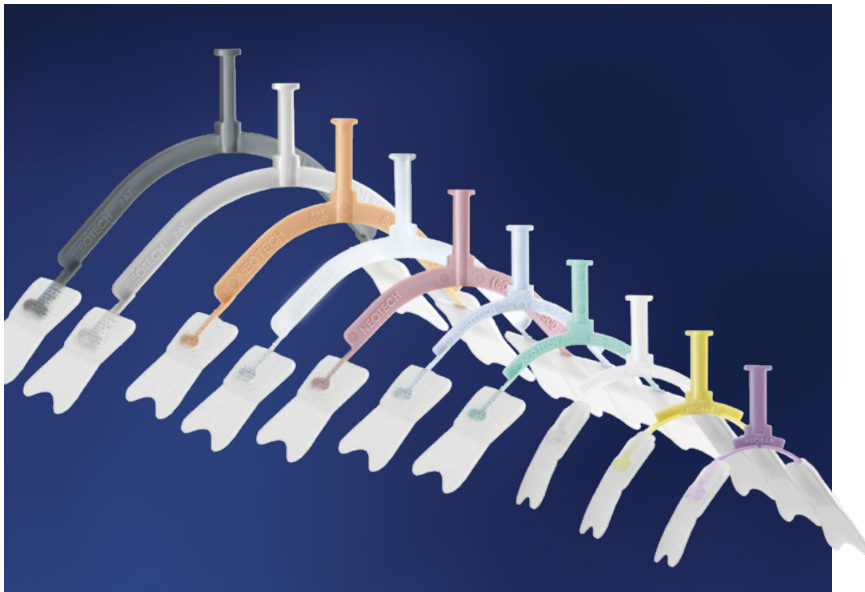

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Abas de hidrocolóide NeoBond® que não agredem a pele
- Tamanhos Macro e Jumbo disponíveis com adesivo acrílico de grau médico
- Criado para reduzir extubações, ajudar a prevenir o trauma do palato e permitir melhor higiene bucal
- Elimina a necessidade de fita adesiva perto do nariz ou boca
- Pode ser cortado para remoção de emergência
- Tamanhos codificados por cores
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

| Cat. #                                                      | Tamanho | Cor     | Unidade de quantidade |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| N709                                                        | Mini    | Roxa    | 5/caixa               |
| N710                                                        | Ultra   | Amarela | 5/caixa               |
| N711                                                        | Micro   | Branca  | 5/caixa               |
| N712                                                        | Pequena | Verde   | 5/caixa               |
| N713                                                        | Grande  | Azul    | 5/caixa               |
| N714                                                        | XL      | Rosa    | 5/caixa               |
| N715H                                                       | Macro   | Clara   | 5/caixa               |
| N716H                                                       | Jumbo   | Cinza   | 5/caixa               |
| <b>Com adesivo acrílico de grau médico</b>                  |         |         |                       |
| N715F                                                       | Macro   | Pêssego | 5/caixa               |
| N716F                                                       | Jumbo   | Carbono | 5/caixa               |
| <b>Sortida</b>                                              |         |         |                       |
| N718 Transporte (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714) |         |         |                       |
| N719N Sortida (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)   |         |         |                       |

Patente dos EUA

#D434,496; #6,050,263



### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoBar é indicado para usar como proteção do tubo endotraqueal. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### Preparação

- 1 Depois de intubar o paciente, selecione o tamanho adequado do NeoBar usando a fita métrica fornecida com este.  
  
Coloque a linha média da banda no septo, cobrindo o ouvido.  
  
A cor que ficar sobre a abertura do canal auditivo corresponde ao tamanho do NeoBar.
- 2 Para garantir um encaixe adequado, posicione o NeoBar no centro da boca, entre os lábios superior e inferior. O NeoBar não deve entrar em contato com os lábios. As alças devem estar na frente do ouvido.
- 3 Limpe e seque a pele, de acordo com o protocolo hospitalar.

*Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. As alças não aderem devidamente à pele ou cabelo úmidos. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.*

**NÃO UTILIZAR ÁLCOOL.**

#### Aplicação

- 1 Antes de retirar a película de proteção, aqueça as alças nas mãos, durante 60 segundos. Também pode aquecer sob fonte de calor por radiação ou bolsa térmica, durante 10 a 15 segundos.
- 2 Retire e descarte a película de proteção. Posicione as alças na frente do osso da orelha e mantenha-as no sítio durante 60 segundos, para garantir a devida aderência.  
  
*Nota: Certifique-se de que o tubo ET está por baixo da plataforma para reduzir a pressão no palato ou na gengiva.*
- 3 Primeiro enrole 1/2 de "fita de tecido branca completamente ao redor da plataforma NeoBar, em seguida, continue a aplicar a fita ao redor da plataforma e do tubo.

#### Remoção

- 1 Substitua o NeoBar a cada 5 dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Desembrulhe a fita para separar o tubo ET da plataforma NeoBar.
- 3 Sature as alças com água ou soro fisiológico.
- 4 Descole lentamente a alça da pele com a ajuda de uma compressa embebida em água ou soro fisiológico.

#### Remoção de Emergência

Corte com cuidado a parte fina do NeoBar com uma tesoura de pontas na junção da barra e da alça.

Remova o NeoBar e o tubo ET que se encontra fixado.

Remova depois as alças. (ver Remoção)

#### - CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS -

O NeoBar é contraindicado para pacientes com infecções de pele ou áreas de pele escoriadas que impediriam o correto posicionamento das alças.

Não se destina a ser usado em adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

O NeoBar só deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O NeoBar não deve entrar em contato com os lábios.

As alças não aderem devidamente a pele ou cabelo úmidos. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.

Não utilizar álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Para remoção imediata, consulte as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Remoção de Emergência.

Utilizar apenas num único paciente.