


NeoPulse™

INVÓLUCRO DESCARTÁVEL DO OXÍMETRO DE PULSO

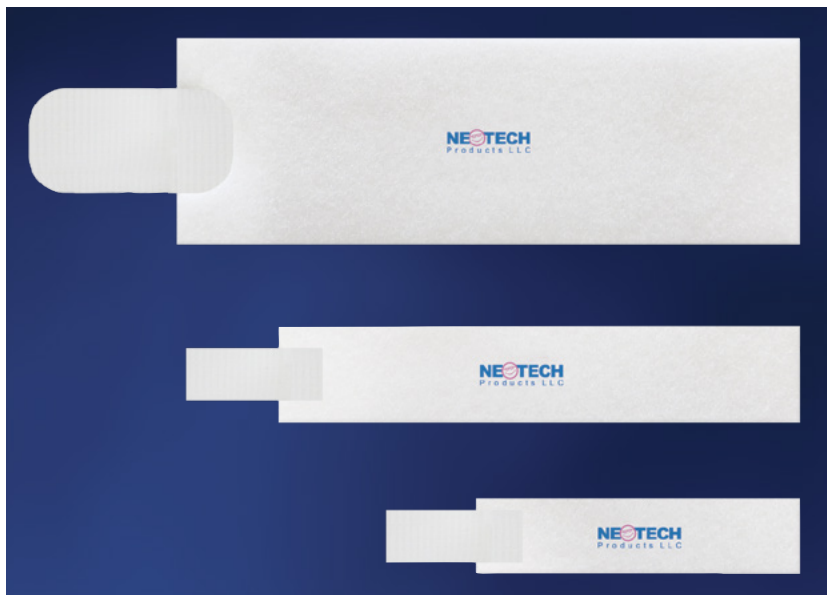

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- NeoFoam® transpirável macio, respirável e adequado para a pele
- Leve, encaixe perfeito e ajustável
- Criado para conforto e estabilidade
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Cat. #	Tamanho	Dimensões	Unidade de uantidade
N781	Pequena	3/4" x 3"	100/caixa
N782	Grande	1" x 5"	100/caixa
N783	X-Large	2" x 6"	100/caixa

INVÓLUCRO DESCARTÁVEL DO OXÍMETRO DE PULSO

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoPulse foi concebido para manter um sensor de oxímetro de pulso no lugar. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 Coloque o sensor do oxímetro de pulso de acordo com o protocolo hospitalar.

2 Acondicione o NeoPulse à volta do sensor do oxímetro de pé e de pulso e aperte suavemente o gancho.

Nota: Pode ser cortado para um ajuste adequado. Certifique-se de que o invólucro não está muito apertado. A aba do gancho deve sobrepor o invólucro por completo.

3 Verifique o pé depois do acondicionamento para garantir uma circulação adequada.

4 Substitua o NeoPulse a cada 5 horas ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro. Substitua imediatamente se estiver visivelmente gasto ou sujo.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilize apenas num único paciente.