


Neotech ChinStrap™

ACESSÓRIO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

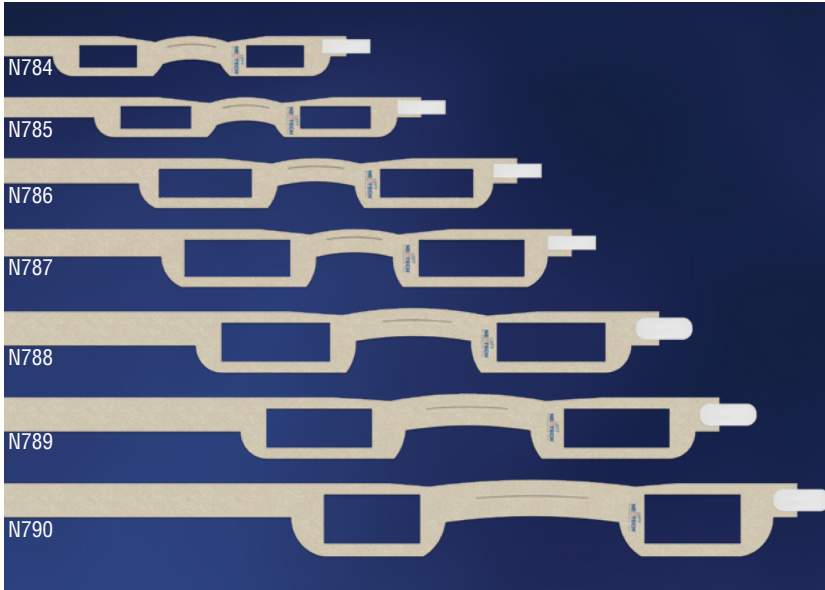

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- NeoFoam® transpirável macio, respirável e adequado para a pele
- A flexibilidade permite movimentos mínimos da boca
- Adequado e ajustável
- Design com divisória de queixo para maior conforto e estabilidade
- Aberturas para as orelhas para evitar dobrar
- Criado para reduzir o risco de úlceras de pressão ou necrose
- O material exclusivo ajuda a prevenir o deslizamento
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Cat No.	Item	Unidade de quantidade
N784	Nano	20/caixa
N785	Micro	20/caixa
N786	Pequena	20/caixa
N787	Grande	20/caixa
N788	Extra-grande	20/caixa
N789	Macro	20/caixa
N790	Jumbo	20/caixa

Patente dos EUA #10,342,693



Neotech ChinStrap™

ACESSÓRIO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Neotech ChinStrap foi concebido para manter a boca do paciente fechada durante o tratamento respiratório. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Selecione o tamanho adequado, medindo a circunferência desde o centro do queixo, passando por por cima da orelha até à parte posterior da cabeça.



- 2 Posicione o Neotech ChinStrap no queixo com o recesso voltado para o pescoço e o lado liso e branco contra a pele.



- 3 Posicione a parte mais larga e baixa da tira do queixo sob o queixo e a parte superior na frente do queixo.

- 4 Puxe a alça em direção à parte posterior da cabeça com as orelhas posicionadas nas aberturas para as orelhas e, com cuidado, prenda a aba do gancho na alça. O lado marcado "LEFT" (ESQUERDA) deve estar posicionado sob a orelha esquerda do paciente.



Nota: Pode ser cortado para um ajuste adequado. Certifique-se de que a tira não está muito apertada e que não pressiona as orelhas. A aba do gancho deve sobrepor a tira por completo.

- 5 Substitua a cada 5 dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Substitua imediatamente se estiver visivelmente gasto ou sujo.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O Neotech ChinStrap não se destina a ser usados em adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilizar apenas num único paciente.